

ThevoChair



Arretierung für Schaukelfunktion

Montageanleitung Zubehör



Locking Mechanism for Rocking Motion

Assembly instructions – Accessory




Monteringsanvisning for låsemekanisme

Monteringsanvisning – Tilbehør



1

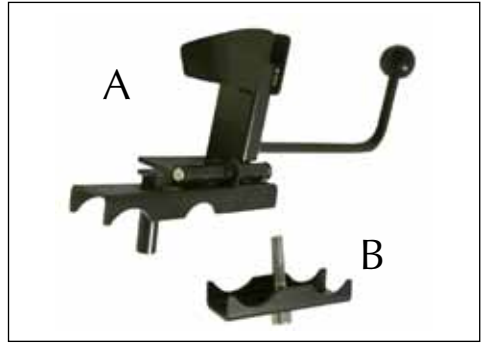

2



3



4



5



6

DE

Arretierung für Schaukelfunktion

Item code: 63916

ThevoChair wie abgebildet vorsichtig seitlich kippen und auf einer sauberen Unterlage ablegen. Die Arretierung muss an der abgebildeten Position, zwischen den beiden Rohren unterhalb der Sitzfläche befestigt werden. (Abb. 1)

Teil B der Arretierung demontieren (Abb. 2).

Zur Montage der Arretierung das Teil A wie abgebildet von der Produkt-Vorderseite zwischen den Rohren einsetzen. Der Hebel muss dabei zur Produkt-Rückseite zeigen. Der Metallbeschlag sollte oberhalb des mittleren Metallsockels montiert werden. (Abb. 3)

Anschließend das Teil B an dem Teil A verschrauben, sodass die Rohre des ThevoChair jeweils in den vorgesehenen Einkerbungen des Metallbeschlags liegen. Die Schraubverbindung fest und sicher anziehen. (Abb. 4)

Den ThevoChair vorsichtig wieder aufrichten. Die Arretierung wird von der Produkt-Rückseite bedient. Zum Arretieren der Schaukelfunktion muss der Hebel nach oben umgelegt werden (Abb. 5), zum Lösen der Arretierung nach links (Abb. 6).

Achtung: Greifen Sie nicht mit den Fingern in die Arretier-Vorrichtung. Bedienen Sie die Arretiervorrichtung nicht bei schaukelndem Sessel.

GB

Locking Mechanism for Rocking Motion

Item code: 63916

Carefully tip the ThevoChair on the side and lay it on a clean surface. The locking mechanism has to be installed at the marked position between both metal tubes under the seating surface. (Fig. 1)

Please remove bolt from part B of the locking mechanisms (Fig. 2).

Insert part A as shown from the front side of the product between the tubes. Make sure that the lever is pointed to the back of the product. The metal bracket should be positioned above the middle metal base. (Fig. 3)

Afterwards please screw part B and A together and make sure that the tubes of the ThevoChair are located in the provided indentation of the metal bracket. Please tighten the screw and secure. (Fig. 4)

Carefully turn up the ThevoChair again. Please use locking mechanism from the back side of the product. To lock out the rocking movement please turn the lever to the top (Fig. 5), for release turn to the left side (Fig. 6).

Warning: Do not insert your fingers into the locking mechanism. Please do not use the locking mechanism while the chair is rocking.



Monteringsanvisning for låsemekanisme som stopper den gyngende bevegelsen til ThevoChair

Item code: 63916

1. Legg stolen forsiktig ned på siden på rent underlag. Låsespaken må monteres på anvist plass mellom de to metallrørene under seteenheten.
2. Demonter låsemekanismen ved å løsne bolten fra del B.
3. Plasser del A inn mellom rørene, som bildet viser fra stolens forside. Pass på at spaken peker ut bak stolens rygg. Metallklemmen (A) skal plasseres ovenfra på midterste metallrør.
4. Skru så sammen del B med A og pass på at rørene kommer i sporene på metallklemmen. Stram til.
5. Sett stolen forsiktig opp igjen, bruk låsemekanismen fra baksiden av stolen.
6. For å låse gyngembevegelsen, skyv spaken oppover. For å løsne opp igjen, skyv spaken mot venstre.

OBS! Ikke putt fingrene inn i låsemekanismen. Hold stolen helt i ro når du låser.

